

HIT Scanner

Untersuchungsaufträge schneller und
besser abarbeiten



Der Tierseuchenkrisenfall

Maul- und Klauenseuche

Am 15.10.2014 in Bernburg/ Strenzfeld



Problematik

Probenblatt
F-021-68-3 gültig ab 01.10.2005

Labor: 01 000 000 0082
Tierbesitzer: 01 000 000 0001
Tierarzt: 01 000 000 0001
Bitte so ankreuzen: ☒ ☐

Lfd. Nr.	Barcode Ohrmarke	IBR Marker gesetzt Alter (Monate/Tage)	Probenbezeichnung (zusätzliche Angaben)	BVD	L/B
Gültig für alle Tiere auf dieser Seite					
1	DE 01 000 00173	7,13	07101345195	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	DE 01 000 00174	8,22	BVD-Ag 25.07.2013 / M / DSN	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	DE 01 000 00176	6,11	BVD-Ag 05.03.2014 / M / RBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	DE 01 000 00178		BVD-Ag 07.10.2013 / M / RBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	DE 01 000 00204	4,15	07101345195	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	DE 01 000 00208	1,11	BVD-Ag 05.03.2014 / W / RBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	DE 01 000 00455	1,11	BVD-Ag 05.03.2014 / W / RBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	DE 01 000 00555	6,15	BVD-Ag 01.10.2013 / W / RBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	DE 01 000 00580	8,25	BVD-Ag 22.07.2013 / M / SBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	DE 01 000 00999	10,12	6473210	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	DE 01 123 45678	231,15	129330346	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	DE 01 125 88981	26,04	BVD-Ag 12.02.2012 / W / SBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	DE 01 125 88982	26,04	BVD-Ag 12.02.2012 / W / SBT	<input checked="" type="checkbox"/>	


Stand: 16.04.2014/15.34.44

Die Arbeit mit Papier Formularen
ist immer schwierig auf dem Feld
oder im Stall.



Projektziel

Eine Methode entwickeln um die Daten **der Proben ID** mit der **Ohrmarkte** zu verheiraten und diese direkt an **HI-Tier** zu übermitteln

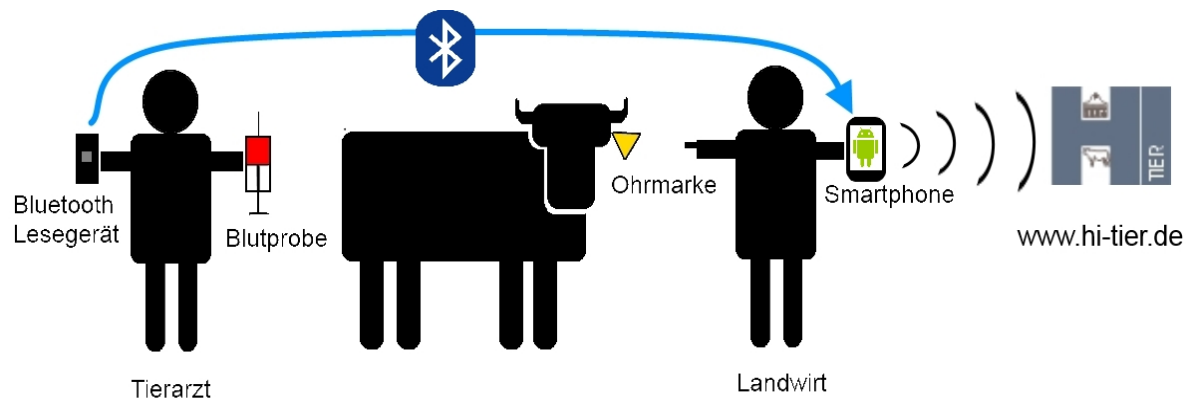




HIT Scanner

1. Auftrag erstellen
2. Auftrag herunterladen
3. Ohrmarke & Proben ID eingeben
4. Auftrag hochladen
5. Proben verschicken


HIT SCANNER

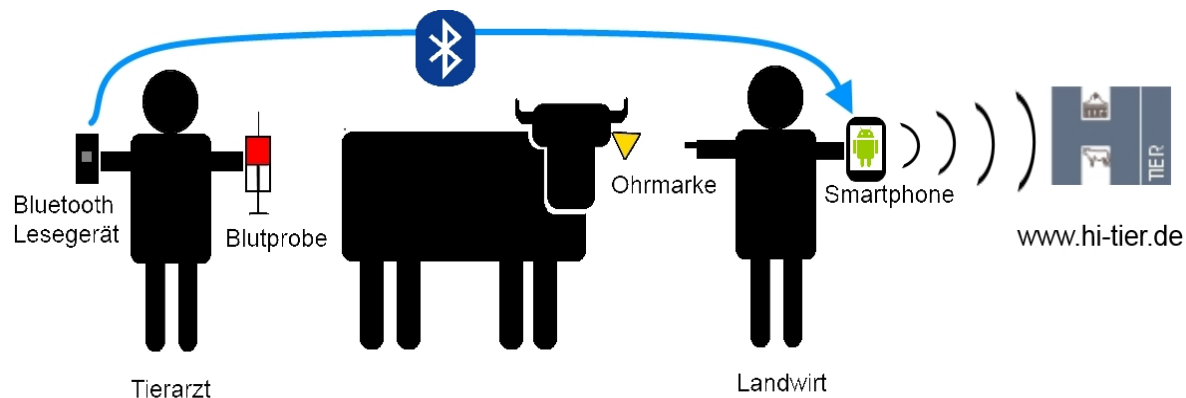



Jetzt verfügbar auf Google Play

Bis Ende 2014 kostenlos

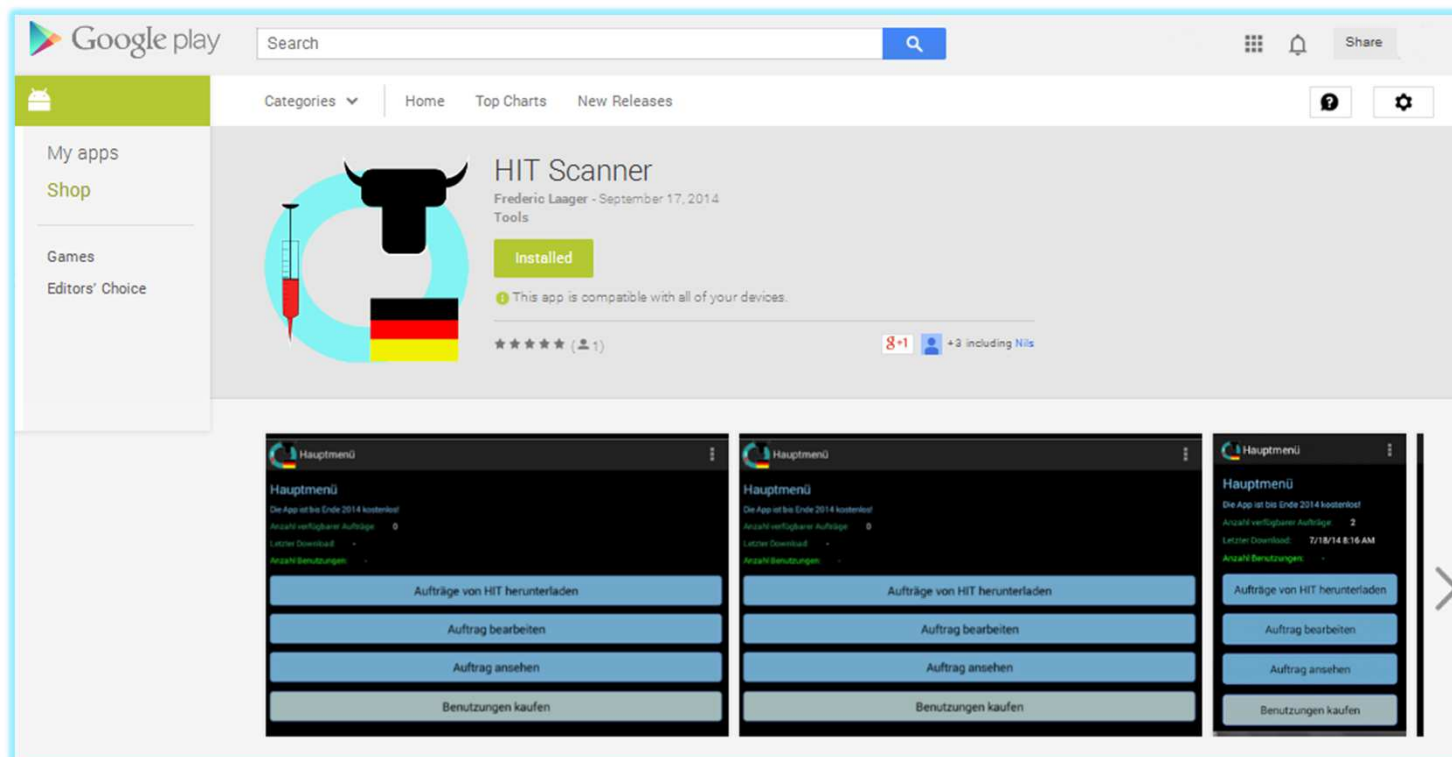



Vorteile

- * Verhindert Fehler
= mehr Sicherheit & weniger Kosten
- * Zeitgewinn für den Landwirt, den Tierarzt & den Laboranten
- * Das Datum der Probennahme ist immer vorhanden
- * Keine Etiketten mehr kleben
- * Intuitive und einfache Bedienung
- * Weniger Papier



Landeslabor Schleswig-Holstein Max-Eyth Str. 5 D-24537 Neumünster Tel. 04321 904 848 Fax 04321 904 819	Untersuchungsauftrag BHV1 / BVD / LB	Deckblatt F 02H-06-gültig ab 01.10.2008
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 01 000 000 0001 Name-D100000000001 Str-0001 10001 Kreis 000 000001 Ort-0001 Tierartbeschriftung (Brennstempel) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Tierartenbeschriftung (Brennstempel) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 01 000 000 0002 Keine Betriebs-Stammdaten vorhanden! 10001 Kreis 000 Tierartbeschriftung (Brennstempel) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Tierartbeschriftung (Brennstempel) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Problem: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Ergebnisse: </div>
Tierartenbeschriftung:		
Problem genannt:		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Angaben zur BHV1-Untersuchung: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Gesamtbestand <input type="checkbox"/> Teilbestand </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Für gB positive Proben bitte anschließend gB-ELISA durchführen </div> <div style="margin-top: 5px;"> Erklärungen: </div> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Angaben zur BVD-Untersuchung: <input type="checkbox"/> alle zur BVD-Untersuchung bestimmten Tiere sind mindestens 41 Tage alt </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Weitere Angaben zu den für die BVD-Untersuchung bestimmten Tieren: <input type="checkbox"/> einmalige Blutabnahme BVD <input type="checkbox"/> Untersuchung bisher noch nicht bestimmter Tiere </div>	
Erklärung des Bestellers: Alle untersuchungsfähigen Tiere werden individuell beschrift. Die Tiere sind mit den angegebenen Kennzeichen versehen! Nicht aufgeführte Kennzeichnungen werden handschriftlich ergänzt.		
Ort, Unterschrift des Erzeugers/Tierhalters		
Ort, Datum, Unterschrift des Bestellers/Tierhalters		
Zeichenerklärung für Probenblatt:		
BHV-1 gB = gelimpfte Tiere gE = gelimpfte Tiere	BVD Erreger-/Antigennachweis zur Erstuntersuchung	LB Leukose / Brucellose
Raum für Vermerk		
Auftragsgeber	Auftragsnummer	
 278 01 000 000 0001 Stand: 14.06.2014/11.27.43	 44	
0306		



Einloggen

3G 3:44

HitScanner

Login

Hauptmenü

Registrieren

3G 3:46

Registrierung

BetriebsNr/MitbenutzerNr

Name

Strasse und #

PLZ und Ort

Tel Nr.

Email

Speichern

3G 3:48

Registrierung

010000000008/66

Müller

Hofstr. 15

446633 Musterhausen




01784488100

mueller@hof.de

Speichern






2. Herunterladen

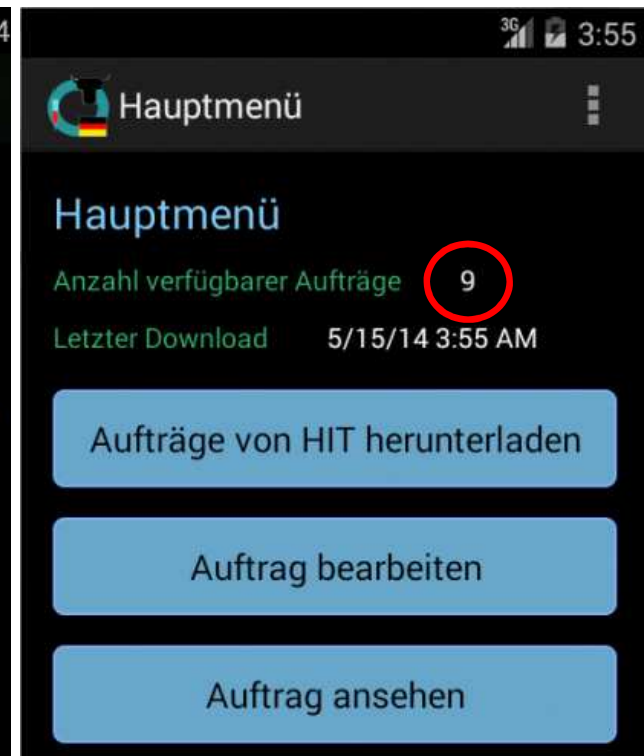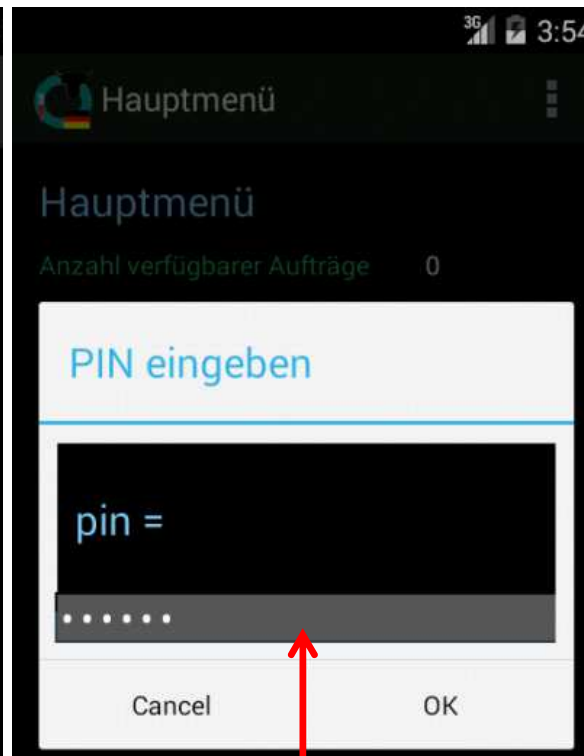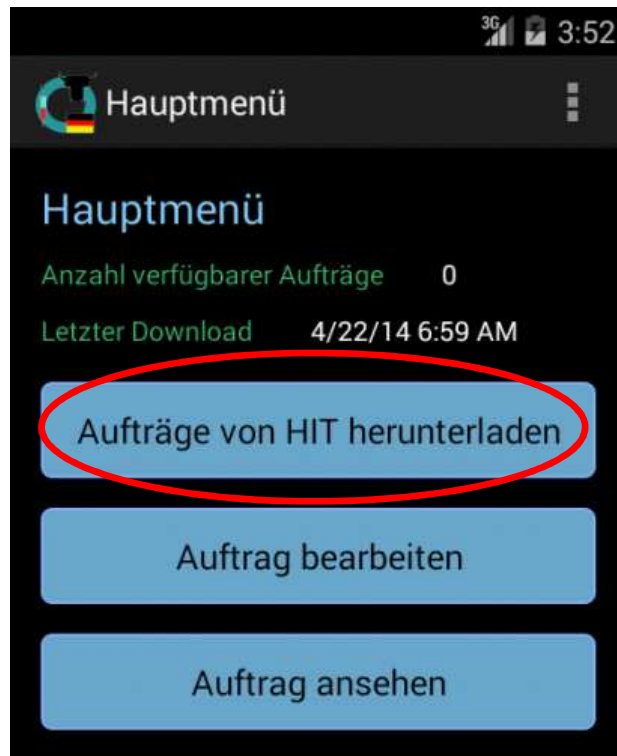

Auf das graue Feld gehen um die Tastatur zu sehen



Bearbeiten

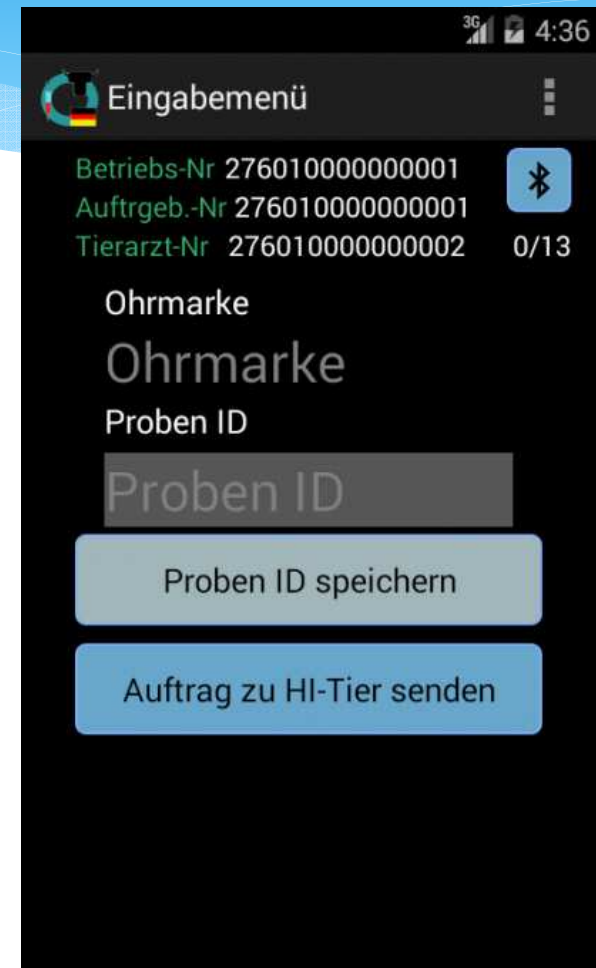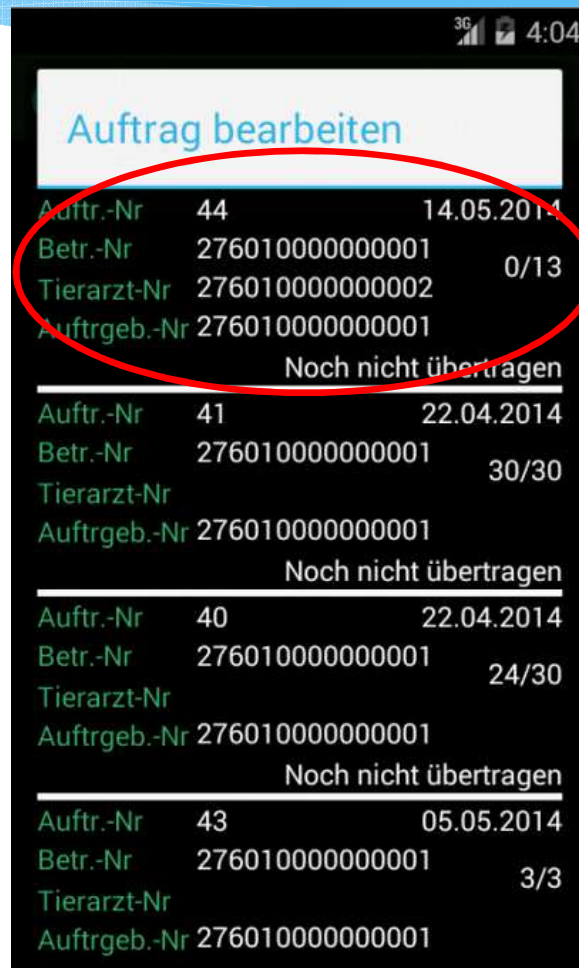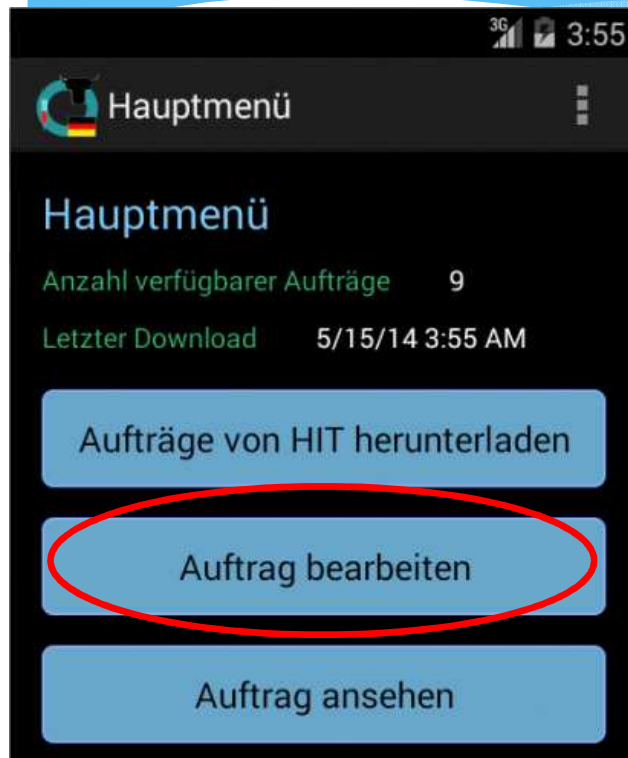



3. Proben ID Speichern

Eingabemenü

Betriebs-Nr 276010000000001
Auftrag-Nr 276010000000001
Tierarzt-Nr 276010000000002 0/13

Ohrmarke
89

DE 01 125 88988
DE 01 125 89000
DE 01 125 88989
DE 01 125 88984
DE 01 125 88991

Auftrag zu HI-Tier senden

Eingabemenü

Betriebs-Nr 276010000000001
Auftrag-Nr 276010000000001
Tierarzt-Nr 276010000000002 0/13

Ohrmarke
DE 01 125 88988

Proben ID
1234567

Proben ID speichern

Auftrag zu HI-Tier senden

Alter (MM.TT): 27.02
Untersuchungsaufträge
BTV Ak

Was zu untersuchen ist

Eingabemenü

Betriebs-Nr 276010000000001
Auftrag-Nr 276010000000001
Tierarzt-Nr 276010000000002 1/13

Ohrmarke
Ohrmarke


Proben ID
Proben ID

Proben ID speichern

Auftrag zu HI-Tier senden

Tier DE 01 125 88988 mit Proben ID 1234567 gespeichert

Hier kann man auch nur die letzten 5 Ziffern eingeben

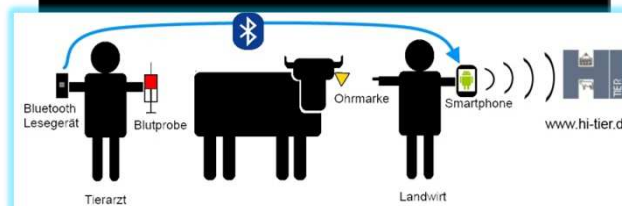



Doppelte Proben ID

3G 4:38

Eingabemenü

Betriebs-Nr 276010000000001

Auftrgeb.-Nr 276010000000001

Tierarzt-Nr 276010000000002 2/13

Ohrmarke

DE 01 125 88984

Proben ID

1234567

Proben ID speichern

Auftrag zu HI-Tier senden

Alter (MM.TT): 27.02

Unter BTV Ak.

Proben ID existiert bereits!



4. Auftrag absenden

3G 4:42

Eingabemenü

Betriebs-Nr 276010000000001
Auftrgb.-Nr 276010000000001
Tierarzt-Nr 276010000000002 10/13

Ohrmarke
Ohrmarke
Proben ID
Proben ID

Proben ID speichern

Auftrag zu HI-Tier senden

Liste der Tiere

Auftr.-Nr 51 02.09.2014
Betr.-Nr 276010000000001 3/99
Tierarzt-Nr
Auftrgb.-Nr 276010000000001

Noch nicht übertragen

Proben ID	Datum
Ohrmarke DE 01 856 29010	02.09.2014
Proben ID	02.09.2014
Ohrmarke DE 01 856 29013	Datum
Proben ID	02.09.2014
Ohrmarke DE 01 856 29014	Datum
Proben ID	02.09.2014
Ohrmarke DE 01 856 29015	Datum
Proben ID	02.09.2014
Ohrmarke DE 01 902 35658	Datum
Proben ID	02.09.2014
Ohrmarke DE 01 999 99999	Datum
Proben ID	02.09.2014
Ohrmarke DE 09 810 00003	Datum
Proben ID	02.09.2014
Ohrmarke DE 01 164 27618	Datum
Proben ID 1232343	03.09.2014
Ohrmarke DE 01 206 06818	Datum
Proben ID 1234313	09.10.2014
Ohrmarke DE 01 458 29486	Datum
Proben ID 3233221	09.10.2014

Tiere MIT / OHNE Proben ID: 3 / 96
Tiere insgesamt: 99 Benutzungen: -

Proben ID löschen?

OK Cancel

Auftrag zu HI-Tier senden

3G 4:47

Liste der Tiere

Auftr.-Nr 44 14.05.2014
Betr.-Nr 276010000000001 10/13
Tierarzt-Nr 276010000000002
Auftrgb.-Nr 276010000000001

Noch nicht übertragen

Proben ID	Datum
Ohrmarke DE 01 125 88986	14.05.2014
Proben ID	14.05.2014
Ohrmarke DE 01 202 56699	Datum
Proben ID	14.05.2014
Ohrmarke DE 01 125 88988	Datum
Proben ID 1234567	15.05.2014
Ohrmarke DE 01 125 88984	Datum
Proben ID 1234568	15.05.2014

Tiere MIT Proben ID 10
Tiere OHNE Proben ID 3
Tiere insgesamt 13

Auftrag zu HI-Tier senden

Bei Fehlern kann durch ein long-click die Proben ID wieder gelöscht werden



4. Auftrag absenden

3G 4:49

Liste der Tiere

Auftr.-Nr 44 14.05.2014
Betr.-Nr 276010000000001
Tierarzt-Nr 276010000000002 10/13
Auftrgeb.-Nr 276010000000001

Noch nicht übertragen

Proben ID 14.05.2014

Achtung! Nicht alle Tiere haben eine Proben ID. Trotzdem senden?

Abbruch Trotzdem Senden

Ohrmarke DE 01 125 88984 Datum
Proben ID 1234568 15.05.2014

Tiere MIT Proben ID 10
Tiere OHNE Proben ID 3
Tiere insgesamt 13

Auftrag zu Hi-Tier senden

3G 4:50

Liste der Tiere

Auftr.-Nr 44 14.05.2014
Betr.-Nr 276010000000001
Tierarzt-Nr 276010000000002 10/13
Auftrgeb.-Nr 276010000000001

PIN eingeben

pin =

Cancel OK

Tiere MIT Proben ID 10
Tiere OHNE Proben ID 3
Tiere insgesamt 13

Auftrag zu Hi-Tier senden

3G 4:50

Hauptmenü

Anzahl verfügbarer Aufträge 9
Letzter Download 5/15/14 3:55 AM

Aufträge von HIT herunterladen

Auftrag bearbeiten



Auftrag ansehen

Auftrag 44 übermittelt!



Fertig !


Deckblatt und Proben abgeben

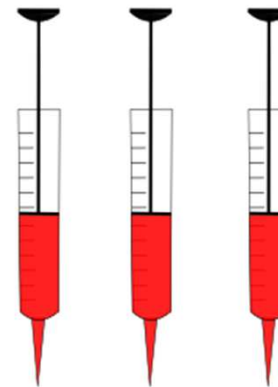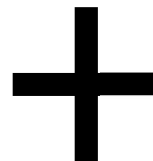

Fragen Sie zu erst nach ob das Labor sich schon auf HIT Scanner eingestellt hat



Auftrag ansehen

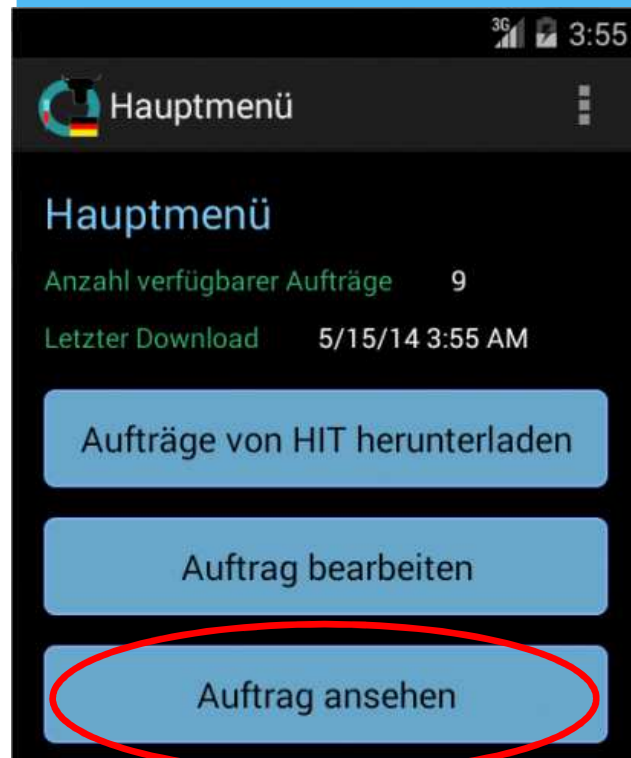

Erfolgreich übertragene Aufträge können nicht mehr verändert werden



Einstellungen &



3G 4:59

Einstellungen

Einstellungen

☐ Mit HitTest Server verbinden

☒ Aufträge automatisch löschen

Löschen nach 50 Tagen

Genaue Proben ID Länge 7

Speichern

Persönliche Daten

Bluetooth Scanner verbinden

Auftrag löschen

HitScanner

Verbundene Geräte
Wählen Sie ein Gerät aus welches schon bekannt ist.

Wireless Scanner

Verbinden

Oder suchen Sie nach Geräten um ein neues Gerät zu finden.

Nach Geräten suchen

3G 5:02

Auftrag löschen

Auftr.-Nr	44	14.05.2014
Betr.-Nr	276010000000001	10/13
Tierarzt-Nr	276010000000002	
Auftrgeb.-Nr	276010000000001	
Erfolgreich übertragen		
Auftr.-Nr	41	22.04.2014
Betr.-Nr	276010000000001	30/30
Tierarzt-Nr		
Auftrgeb.-Nr	276010000000001	
Noch nicht übertragen		
Auftr.-Nr	40	22.04.2014
Betr.-Nr	276010000000001	24/30
Tierarzt-Nr		
Auftrgeb.-Nr	276010000000001	
Übertragung fehlgeschlagen!		
Auftr.-Nr	43	05.05.2014
Betr.-Nr	276010000000001	3/3
Tierarzt-Nr		
Auftrgeb.-Nr	276010000000001	



Hardware



MISCO (unitech)

- * Unitech MS912-CUBB00-SG 1D Pocket Bluetooth CCD Scanner
- * 92,00 € + MwSt



Scanner Bestellen

Der Rabatt link

92.- € statt 129.- €

www.super-lab.de/scanner

Scanner bestellen

Empfohlener Scanner
Der MS912-CUBB00-SG von
Unitech



€109,48 inkl. MwSt.
€92,- zzgl. MwSt.

ZUR AKTION!

Der Scanner kann mit 25% Rabatt
bei MISCO bestellt werden, geben
Sie dafür folgenden Link ein, oder
gehen Sie auf das Bild:

www.super-lab.de/scanner

Die App kann auch mit anderen ähnlichen
Produkten funktionieren.

MISCO A Systemax Business

SUCHE FÜR SIE ERREICHBAR 06102 8227 227

Shop by Brand IT Lösungen Großkunden Konfiguratoren Aktionen Newsletter bestellen

DIREKT ERREICHBAR | Die neuen Telefonnummern von MISCO A Systemax Business

Home - Peripherie - Barcodescanner

Unitech MS912-CUBB00-SG 1D Pocket Bluetooth CCD Scanner

MISCO Nr.: 700230795 Bewertung hinzufügen Seite drucken / Seite versenden

Hersteller Artikelnr. Unitech / MS912-CUBB00-SG/SUPERLAB

unitech

Preis: **109,48 €** inkl. MwSt.
92,00 € zzgl. MwSt.
+ Versandkosten

Verfügbarkeit: Bitte Liefertermin anfragen

Menge 1 + Kaufen





Ende

Vielen Dank für Ihre Zeit



www.super-lab.de

